




Características de Cochlear Wireless Phone Clip

- Disfrute de la posibilidad de realizar llamadas con manos libres directamente con el procesador de sonido de la serie CP900.
- Escuche los sistemas de navegación con el Bluetooth® habilitado.
- Realice streaming de música desde un dispositivo con el Bluetooth® habilitado.

Phone Clip se puede fijar con facilidad a la ropa. El micrófono incorporado recogerá y transmitirá su voz, incluso si su teléfono está a varios metros de distancia.

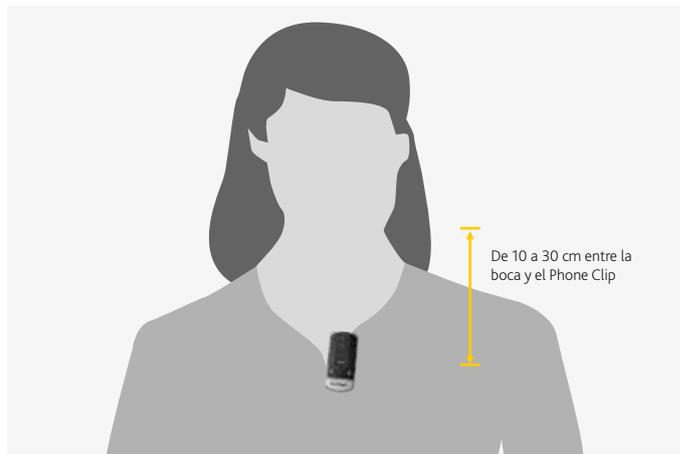

Vista general del producto



Primeros pasos

Carga de la pila

Conecte uno de los extremos del cable de carga micro-USB incluido en el Phone Clip y el otro en un ordenador o una toma de corriente con el adaptador suministrado.

Cuando el indicador LED rojo situado en la parte superior del Phone Clip se vuelve verde con un destello rojo cada 2 segundos, la carga ha finalizado.

Antes de comenzar a utilizar el Phone Clip, debe dejar que se cargue al menos durante 3 horas, aunque la luz indique que se ha cargado por completo. La pila no se puede sobrecargar.

Nota: El Phone Clip proporciona 6 horas de tiempo de uso u 80 horas de tiempo en espera con una carga completa.



Enlace con el procesador de sonido de la serie CP900

- A** Apague el procesador de sonido de la serie CP900.


Quítese el procesador de sonido del oído.
Mantenga pulsado el botón inferior durante dos segundos.



- B** Conecte el Phone Clip y retire la tapa plateada.



- C** Pulse el botón de enlace blanco del Phone Clip una vez con la punta de un bolígrafo u objeto similar.

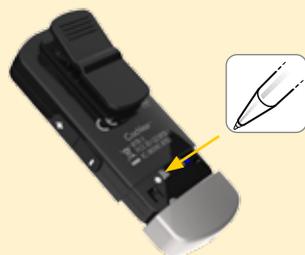

- D** El LED parpadeará en amarillo cada dos segundos y el Phone Clip estará ahora en modo de enlace durante 20 segundos.



- E** Mientras el modo de enlace está activo, conecte el procesador de sonido.

Pulse la tecla inferior.

Un indicador luminoso azul parpadeará para indicar que el enlace se ha realizado con éxito.





Enlace con el teléfono móvil

A Conecte el Phone Clip y retire la tapa plateada.



B Asegúrese de que la función Bluetooth del teléfono móvil está activada. Consulte la guía de usuario del teléfono móvil para obtener instrucciones. Pulse el botón azul de enlace de Bluetooth de Phone Clip una vez para activar el modo de enlace durante 2 minutos.



C Durante el modo de enlace, el LED será azul.



D En su teléfono móvil, busque los nuevos dispositivos Bluetooth y seleccione "Prótesis auditiva teléfono" de la lista.

E Si su teléfono móvil solicita una contraseña, introduzca "0000" (cuatro ceros).

F El Phone Clip debe estar ya enlazado con el teléfono móvil. Si el teléfono móvil pregunta qué dispositivo Bluetooth desea activar, seleccione "Headset".

Indicadores luminosos (LED) de Phone Clip

El indicador LED situado en la parte superior del teléfono funciona como una interfaz de usuario multifunción, que proporciona información sobre el estado del dispositivo.

Parpadeos	Significado
	Funcionamiento normal (verde)
	Pila baja (amarillo)
	Carga (rojo)
	Completamente cargado: sigue conectado al cargador (rojo/verde)
	Listo para el enlace con procesador de sonido (amarillo)
	Listo para el enlace con un dispositivo Bluetooth (azul)
	Llamada Bluetooth activa (azul)

Conexión con el teléfono móvil

Para recibir o realizar llamadas de teléfono con el Phone Clip, la función Bluetooth® debe estar activada en el teléfono móvil. El teléfono puede pedirle que confirme si desea conectar con el Phone Clip después de que se haya enlazado correctamente.

Si tiene que conectar manualmente, busque una lista de "Dispositivos enlazados" en el menú Bluetooth® del teléfono. De esta lista, seleccione "Prótesis auditiva teléfono" y "Conectar".

Ahora puede utilizar ya el Phone Clip.

En algunos teléfonos también puede activar "Reconexión automática". Consulte la guía de usuario del móvil para obtener instrucciones al respecto.

Consejo: En la mayoría de los casos, el icono de un auricular en la pantalla principal del teléfono móvil confirmará que se ha conectado correctamente.



Uso de Phone Clip

Gestión de las llamadas con el botón aceptar/cortar llamada



- **Llamadas entrantes:**
Para responder a una llamada, pulse una vez.
Para rechazar una llamada, haga doble clic.
- **Durante una llamada:**
Para transferir una llamada iniciada en el teléfono al Phone Clip, pulse una vez.
Para poner una llamada en espera, pulse y mantenga pulsado durante 2 segundos.
- **Para realizar una llamada:**
Para volver a marcar el último número, haga doble clic.
Para activar la marcación por voz, pulse y mantenga pulsado durante 2 segundos.

Streaming de música desde el teléfono

Puede utilizar el Phone Clip para obtener música por streaming del teléfono móvil o el ordenador.

- Conecte el dispositivo Phone Clip mediante Bluetooth.
- Comience a reproducir música en el dispositivo.
- Escuche el streaming de audio desde el dispositivo.
- Para detener el streaming, detenga la reproducción de música en el dispositivo.



Consejo: Para cambiar el volumen, utilice los controles de volumen del Phone Clip.

Asistencia

Si desea más información sobre Cochlear Wireless Phone Clip, consulte la guía de usuario incluida con este dispositivo y la guía de usuario de los accesorios inalámbricos.

Si desea más información sobre el procesador de sonido Cochlear de la serie CP900, consulte la guía de usuario correspondiente.

Si desea más información y vídeos informativos, visite el sitio web de Cochlear: www.cochlear.com

Cochlear Wireless Accessories:

■ **Cochlear Bone Anchored Solutions AB** Konstruktionsvägen 14, SE - 435 33 Mölnlycke, Sweden

Tel: +46 31 335 1461 Fax: +46 31 335 1460

Nucleus 6 System:

■ **Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Regional Offices:

Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

■ **Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG** Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

株式会社日本コクレア (**Nihon Cochlear Co Ltd**) 〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com